


////
SOLUTION

Imagerie Mammaire

IRM

Automatisation
fluide, résultats
rapides

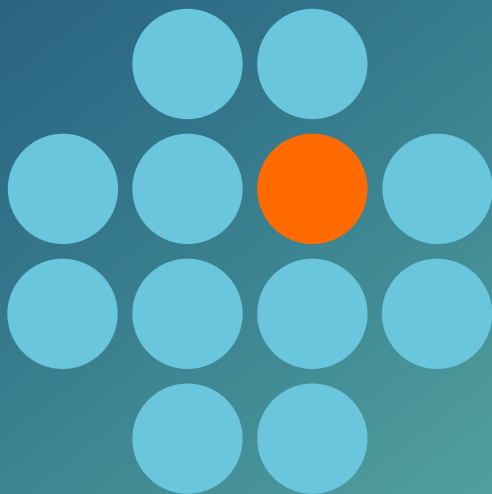

Olea
medical

breastscape® V1.0 est une solution complète de post-traitement multi-construteurs adaptée à tous les besoins en IRM mammaire. En automatisant et en standardisant les étapes clés telles que la segmentation, les mesures, l'intégration des rapports et l'analyse longitudinale, notre solution réduit les interruptions dans le workflow et permet d'obtenir des résultats rapides et fiables.



Post-traitement automatisé

- Génération de cartes ADC/kinétiques, soustraction DCE, MIP et color overlay map

Intégration fluide au PACS

- Transfert de toutes les cartes paramétriques, soustractions et rendus 3D directement vers le PACS

Segmentation et rapports

- Délimitation instantanée des volumes d'intérêt (VOI) avec calcul automatique des volumes, diamètres, distances (mamelon, peau, thorax) et courbes cinétiques, intégrés dans des rapports structurés BI-RADS®

Mode de visualisation riche


- 4D MIP, MPR et soustraction automatique pour tous les types de protocoles DCE et séries DWI

Analyse longitudinale et multiparamétrique

- Alignement automatisé des études sérielles et évaluation morphologique et fonctionnelle simultanée (cartes ADC, cinétiques)

Planification dédiée à la biopsie (optionnelle)

- Plug-in breastLoc® avec modèles de grilles, blocs et aiguilles multi constructeurs intégrés pour la préparation des biopsies guidées par IRM, permettant un accès rapide aux mesures et trajectoires

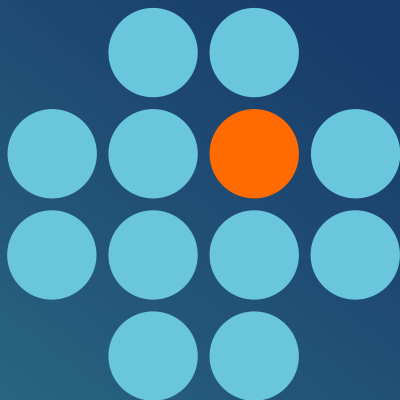

Olea Medical, fondée en 2008, développe des logiciels et solutions innovantes d'imagerie médicale.

Depuis 2015, la société appartient au groupe Canon, renforçant ainsi sa capacité à mettre la technologie au service de la santé.

Forte d'équipes pluridisciplinaires et de partenariats avec des institutions médicales et scientifiques de renom, Olea Medical s'impose aujourd'hui comme un acteur reconnu à l'international. Son ambition reste inchangée : améliorer la prise en charge des patients afin de sauver le plus grand nombre de vies, fidèle à son mantra : **"Improved diagnosis for life"**.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre solution ?

**DEMANDE
DE DÉMO**



<https://www.olea-medical.com/fr/demande-de-demo>



Olea
medical

ZI Athelia IV - 93, avenue des Sorbiers
13600 La Ciotat - FRANCE
PH +33 4 42 71 24 20 - FX +33 4 42 71 24 27



www.olea-medical.com

Olea Sphere® V3.0 et breastscape® V1.0, logiciels de post-traitement d'imagerie médicale, sont des dispositifs médicaux fabriqués et commercialisés par Olea Medical®. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux professionnels de santé. Ces logiciels ont été conçus et fabriqués conformément au système de gestion de la qualité EN ISO 13485. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant toute utilisation. Les instructions d'utilisation sont disponibles sur : <https://www.olea-medical.com/en/customer/connexion/>

FABRICANT OLEA MEDICAL SAS (FRANCE)

• Europe : Dispositifs médicaux de classe IIa - CÉ 0459
• FDA (États-Unis) : Dispositifs médicaux de classe II

BR-09-2025-OM-MKT-IMAGERIE-MAMMAIRE-FR